

Chroń swoich bliskich i siebie




- ❖ DOKŁADNY
- ❖ SPRAWNY
- ❖ SZYBKI
- ❖ WYGODNY



Wynik testu po 15 minutach


Do badania wystarczy tylko 1 kropla krwi z palca

Wykonaj samodzielnie, wynik tylko dla Ciebie

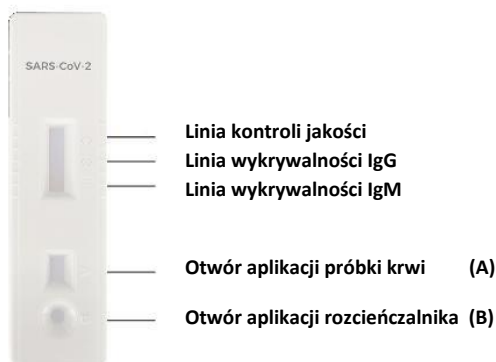

RODZAJ PRÓBKII	krew pełna/ plazma / surowica		
OBJĘTOŚĆ PRÓBKII	20 µl	10 µl	10 µl
CZAS REAKCJI	15 minut		
ROZMIAR OPAKOWANIA	20 testów w pudełku		
WARUNKI SKŁADOWANIA	4°C – 30°C		
TERMIN PRZYDATNOŚCI	12 miesięcy		

Test na przeciwciała

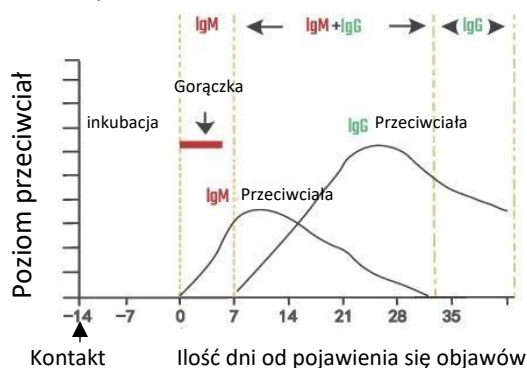


Przeciwciała pojawią się po kontakcie z wirusem.

Przeciwciała M (IgM) pojawiają się jako pierwszy sygnał na wczesnym etapie infekcji.


Przeciwciała G (IgG) pojawią się później jako specyficzny efekt silniejszej reakcji na wirusa.

Kroki działania


Krok 1 Umieść 1 kroplę krwi w miejscu (A)

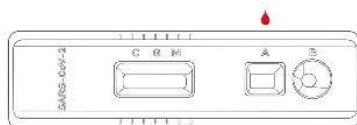

Krok 2 Dodaj 2 krople rozcieńczalnika w miejscu (B) i rozpocznij pomiar czasu

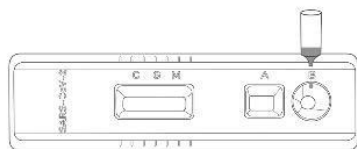

Krok 3 Wyniki testu będą czytelne po 10-15 minutach. Po czasie dłuższym niż 20 minut wynik traci ważność

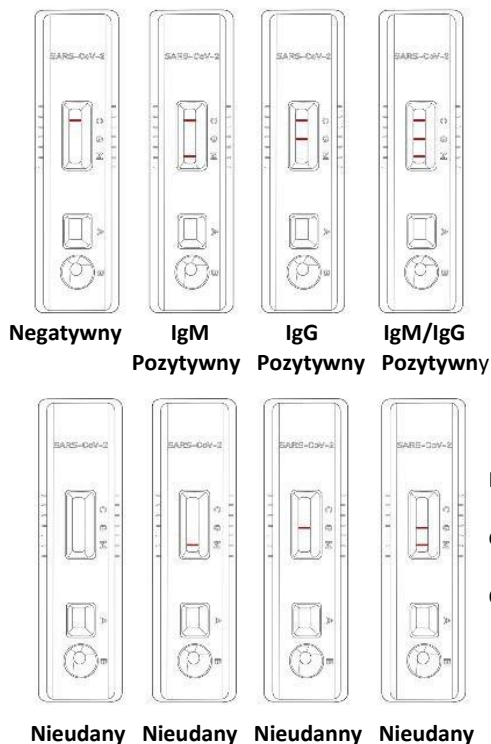

Informacje o produkcie: tel.: 62 765 9593

www.albis.com.pl